

FICHE RECOMMANDATIONS PRELEVEMENT URINES SUR SONDE POUR ECBU



Laboratoire de Biologie Médicale Tél : 05.65.55.26.20

Conditions de prélèvement, matériel

♦ Sonde à demeure

- gants
- antiseptique bétadine alcoolique
- corps de pompe vacutainer monté sur aiguille noire (petit calibre) + tube boraté

♦ Sondage évacuateur

- gants **stériles**
- antiseptique type Dakin
- gel de xylocaïne
- sonde urinaire adaptée
- flacon stérile + tube boraté (*)

♦ Patient porteur d'un étui pénien

- gants
- antiseptique type Dakin
- flacon stérile + tube boraté (*)

Prélèvement

♦ Sonde à demeure

- Recueil à l'aide du système de prélèvement directement sur le site de ponction de la sonde après désinfection avec une compresse imbibée de bétadine alcoolique et après avoir clampé en amont et en aval

Ne jamais prélever dans le sac collecteur

Si l'ECBU est demandé à l'occasion d'un changement de sonde, recueillir l'urine après mise en place de la nouvelle sonde


♦ Sondage évacuateur

- Se reporter au protocole en vigueur du CLIN

♦ Patient porteur d'un étui pénien

- pratiquer une antisepsie soigneuse des muqueuses
- clamber et attendre l'accumulation d'urines
- recueillir les urines dans le flacon stérile

Sinon pratiquer un sondage évacuateur

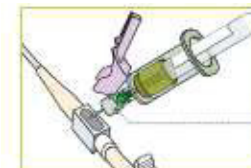

(*)  Flacon de recueil + tube boraté bouchon kaki  (voir (protocole de transfert indiqué sur le bouchon du pot)

 Transmettre uniquement le tube boraté au laboratoire (quantité minimale 5 ml)

En cas d'impossibilité : utiliser un pot stérile ordinaire  fermé correctement



Acheminement au laboratoire

- Tube boraté : à température ambiante dans les 24h
- Pot stérile ordinaire : à température ambiante dans les 2 heures ou sinon conservation à + 4°C 12 heures maximum
- Joindre la fiche de prescription complétée avec les renseignements cliniques